



repose[®]
ultracore[®]

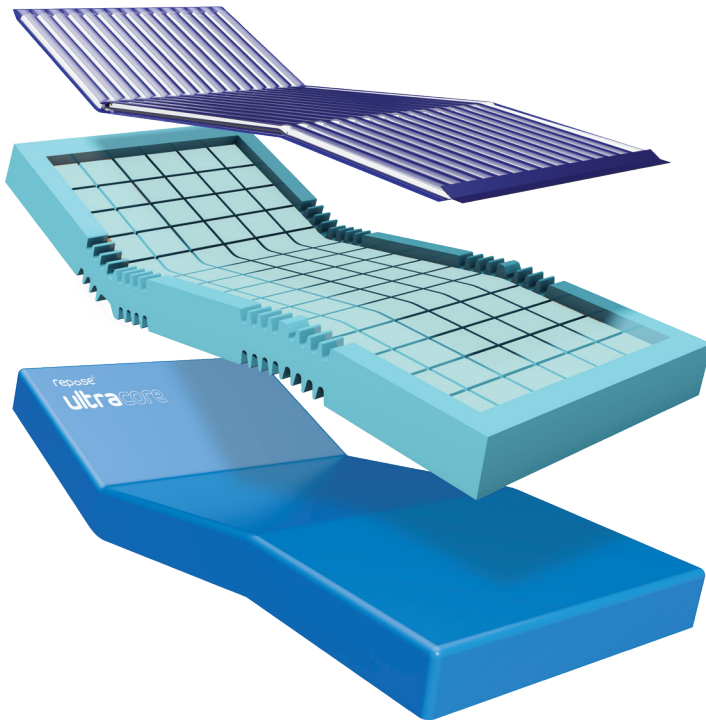


instructions for use

www.reposedirect.com

repose[®]
ultracore[®]

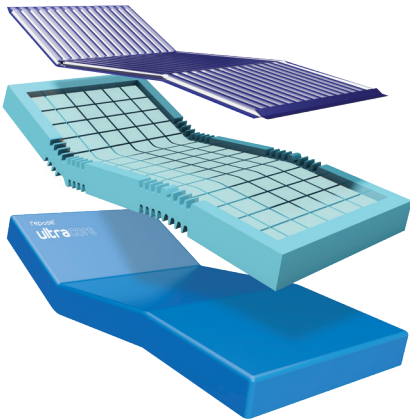

repose[®]
ultracore[®]
plus

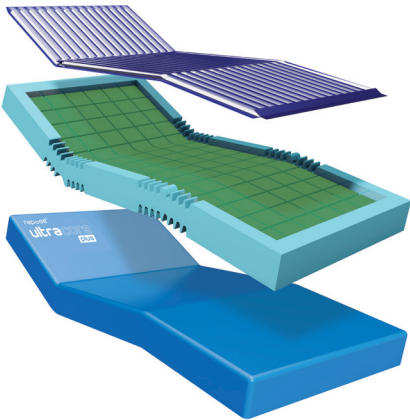

PRODUCT SPECIFICATION

Product	Foam Density / Hardness		Dimensions (cm)		
	Support Surface	Walls	Width	Height	Length
Repose [®] ultracore [®]	33 / 120	39 / 200	88	15	198
Repose ultracore plus	33 / 160	39 / 200	88	15	198

This user manual contains important information on the correct usage, handling, cleaning and decontamination. Please read carefully prior to use.

! IMPORTANT Indicates a hazardous situation that could result in damage to property if it is not avoided.

PRODUCT DESCRIPTION

Repose® ultracore® is an immersive, static air, polyurethane foam hybrid mattress, designed to meet the demands of the home care and acute care healthcare environments.

Repose ultracore combines several different components that when combined, provide healthcare professionals and patients exceptional levels of comfort and pressure redistribution properties. At its core, is the Repose mattress overlay, which has over 18 years of clinical evidence to support its ease of use and durability.

Repose ultracore mattress consists of the following components:

- **Repose ultracore** - A high specification, polyurethane foam U-core base with integrated side and a base profiling
- **Repose ultracore overlay** - A single air cell responsive mattress made from thermoplastic polyurethane, which is multi-stretch and moisture vapour permeable
- **Repose ultracore cover** – A multi-stretch, moisture vapour permeable cover, with zip openings on three sides, including a protective zip cover and welded seams, to provide fluid ingress resistance

INDICATIONS FOR USE

Repose ultracore mattress is designed for the prevention and treatment of pressure ulcers and is intended to be used in conjunction with an appropriately sized bed frame, as part of a pressure ulcer prevention program.

Repose ultracore mattress is designed to be cleaned and reused.



PRECAUTIONS

Repose ultracore mattress is not suitable for the following:

- Must not be used on a double bed mattress frame
- Not for persons weighing in excess of 222 kg / 35 stone
- Not for persons with unstable spinal fractures
- Avoid direct contact with heat and sharp objects
- Keep away from pets
- Where body shape is such that the person cannot be fully supported

PRODUCT LABELLING



65°C for 10 minutes or
73°C for 3 minutes



Bleaching agent
allowed



Max user weight




Do not pierce or cut




Latex free



Do not put near flame

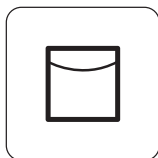

Line dry

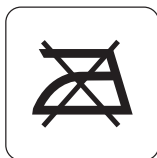

Do not iron



CE conform




Refer to user manual

USER INSTRUCTIONS

! IMPORTANT To aid storage and handling, this ultracore mattress has been delivered compact rolled. The mattress should be unrolled within 21 days of receipt. Once unrolled open the mattress cover and place the inflatable Repose ultracore inner overlay, clear side up inside the foam surround.

- Push umbilical through hole at either end
- Orientate the cover with the umbilical

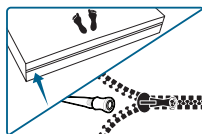

Release the zip to gain access to the
Repose umbilical Tube

STORAGE & CARE

Mattresses should be stored in a secure location away from the general public.

- Never store other items on top of ultracore
- Always store ultracore flat
- Do not store directly on the floor
- Place a protective covering over ultracore during storage
- Do not store mattresses next to radiators or other heating devices
- It is recommended that the ultracore is handled by a minimum of two people. Do not drag!
- Do not place heavy objects on the mattress surface when not in use
- Do not allow sharp objects to penetrate the cover
- Regularly inspect the interior and exterior of the mattress
- Do not store in damp conditions

! IMPORTANT When removing packaging use great care to ensure the cover is not damaged.

Repose ultracore can be used one hour after unrolling. However, it may take longer before the mattress is fully restored to its original shape.

! IMPORTANT Please ensure that once unrolled the cover seams sit correctly to the edges of the foam mattress and that the zip is fully closed before use. Some seam slippage may occur in the rolling process but can easily be realigned over the mattress core.

Some degree of creasing may occur to the mattress cover; this is a normal result of the rolling process.

! IMPORTANT It is recommended that 2 people lift / carry the mattress. Mattresses can become damaged when stored incorrectly.

Repose ultracore mattress has been designed for use on solid, mesh, profiling and flatbed bases, for patients identified as being at high risk of developing a pressure ulcer, with a maximum weight of 222 Kg / 35 stone.

Ensure that the surface of the bed frame is clear from debris before placing the mattress as this can damage the coating of the cover.


The cover on the ultracore is removable for cleaning purposes, Please see section 'Cleaning & Care'.

The label on the mattress has a unique batch number which should be retained and used in the event of a warranty claim. NEVER remove the label, please refer to the section 'Warranty'.


REPOSE INNER MATTRESS PUMP UMBILICAL LOCATION




The repose mattress umbilical is located inside the outer cover, bottom left hand corner as you stand at the foot of the bed. For inflating & checking of internal pressure.

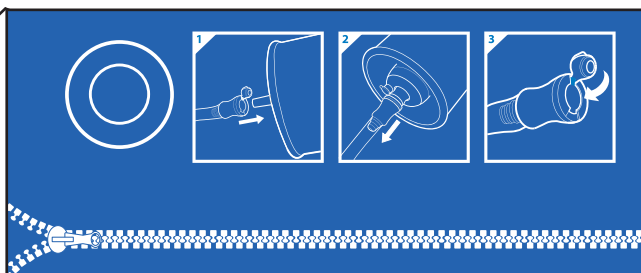


INSTRUCTIONS FOR USE

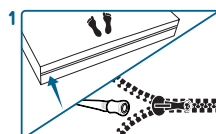

Release the zip to gain access to the Repose umbilical Tube

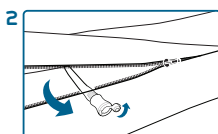


Release umbilical connection cap

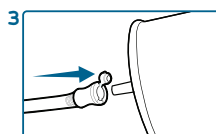


Connect pump nozzle to umbilical tube




Inflate the Repose Ultracore Mattress until air is heard escaping from the pump valve followed by an audible click

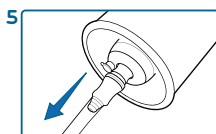

Remove pump from umbilical connector

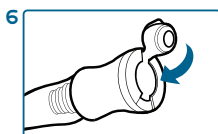

Replace umbilical connection cap

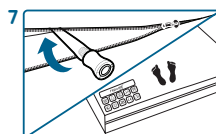

Replace umbilical tube back inside the cover and close zip

NOTE: Check device daily to ensure proper inflation level. In case of doubt, repeat pumping procedures above with the user off the product.

CLEANING & CARE – REPOSE ULTRACORE COVER

LIGHT SOILING

! IMPORTANT In the absence of gross contamination or unusual risk. The removal of dirt and spillages with a neutral detergent and warm water should be sufficient. However, if required the cover can be wiped down with a 0.1% hypochlorite solution (1000ppm). Ensure that the cover is rinsed with clean water using a single use non-abrasive cloth, and thoroughly dried. Ensure adequate ventilation.

HEAVY SOILING

! IMPORTANT In cases of gross contamination the mattress cover should be cleaned first with detergent and water and then with a diluted solution of 0.1% hypochlorite (1,000ppm). Rinse well with clean water and wipe down with a damp single use non-abrasive cloth, and thoroughly dried. Ensure adequate ventilation.

! IMPORTANT If required, a 1% hypochlorite solution (10,000ppm) and cold water may be applied for no more than 2 minutes.

! IMPORTANT Machine washing instruction for outer mattress cover.

Disinfection may be achieved by laundering at temperatures not exceeding 65°C for 10 minutes or 73°C for 3 minutes. **Protect, Rinse and Dry -BHTA guidance on the care, cleaning and inspection of healthcare mattresses. (January 2012 - HHTA HM 0112)**

DRYING

! IMPORTANT To avoid shrinkage, line dry in an indoor clean environment. Covers must be thoroughly dried before re-fitting to the mattress.

! IMPORTANT Do not mangle or iron.

INSPECTION



WARNING:

Inspect the inner and outer surfaces of covers and their zip fasteners regularly for signs of damage. If the cover is stained, soiled or torn, the foam and Repose core should be examined. Damaged / soiled covers and mattresses should be reported to the ward / department manager. If the core of the mattress is wet or badly stained, the mattress should be withdrawn from service.

CLEANING & CARE – REPOSE ULTRACORE OVERLAY

- Repose ultracore overlay can be cleaned with soap or detergent and water and can be disinfected in accordance with **Protect, Rinse and Dry -BHTA guidance on the care, cleaning and inspection of healthcare mattresses. (January 2012 - HHTA HM 0112)**
- Alcohol & phenol based disinfectants should not be used
- Allow to dry before re-use or storage

! IMPORTANT Disposable gloves and aprons should be worn. As splashing could occur, it is recommended that eye / face protection should also be worn. On removal of gloves, hands should be washed. Ensure Repose ultracore overlay is thoroughly dried before placing back inside the cover.

AUDIT

! IMPORTANT It is recommended that a 6 monthly or annual audit of all mattresses within a ward / department should be performed.

In the homecare setting, an audit should also be performed between each change of patient.

RE-USE

! IMPORTANT A cleaning record should be kept. The product is suitable for repeated use. Before re-use, clean the product thoroughly, please refer to the section `Cleaning & Care`.

DISPOSAL

! IMPORTANT The disposal and recycling of used product and packaging must comply with the applicable legal regulation in each country.

CPR MODE

CPR should be carried out on a hard surface for correct compression and depth of compression, if the patient needs intervention this should not be delayed, but if possible PAT slide or moving a patient to a hard surface should be advised.

FIRE TESTING

The interior foams meet the requirements of The Furniture & Furnishings (Fire) (Safety) Regulations 1988.

1. UK specification ultracore mattress meets the requirements of BS 7177: 2008 for medium hazards
2. European specification ultracore mattress meets the requirements of BS EN 597-1: 1995 / BS EN 597-2: 1995

WARRANTY

Repose ultracore warranty is valid from time of shipping. If a defect or fault is discovered, please contact Repose customer service on Tel: 0044 (0) 1495 235800 / email: info@reposedirect.com immediately. Frontier Medical Group will not accept responsibility for damage caused by misuse or non-observance of the instructions set out in this instruction for use document. During the period of the warranty, any products that have become defective due to faulty workmanship or materials will be renewed. Product warranty will be forfeited should any unauthorized alteration be made to the equipment. Both warranty and fire retardancy certification will be null and void if non-Repose spares are used on any Repose ultracore mattress products.


WARRANTY – FOAM & OUTER COVER

- 5 years from date of dispatch, covering against manufacturers defects
 - Normal wear and tear would not be included
 - All warranties subject to terms and conditions of trading
 - Warranty claims must be accompanied with appropriate batch numbers which can be found printed on the product labels
-


WARRANTY - INNER REPOSE MATTRESS OVERLAY

- 3 years from date of dispatch, covering against manufacturers defects
- Normal wear and tear would not be included
- All warranties subject to terms and conditions of trading
- Warranty claims must be accompanied with appropriate batch numbers which can be found printed on the product labels

repose[®]
ultracore[®]

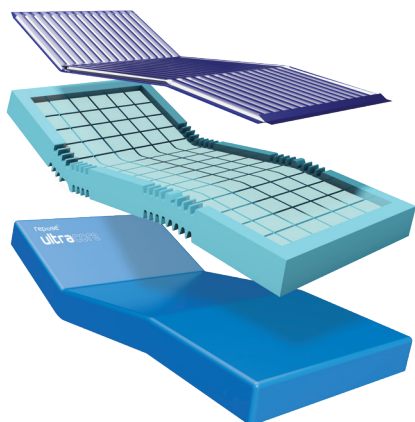

repose[®]
ultracore[®]
plus

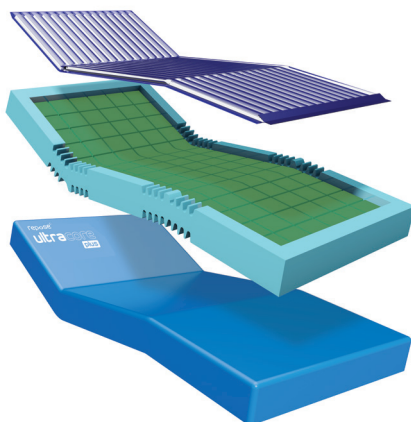

PRODUCTSPECIFICATIE

Artikel	Schuimdensiteit/hardheid		Afmetingen (cm)		
	Ligoppervlak	Boord	Breedte	Hoogte	Lengte
Repose® ultracore®	33 / 120	39 / 200	88	15	198
Repose ultracore plus	33 / 160	39 / 200	88	15	198

Deze gebruikershandleiding bevat belangrijke informatie voor het juiste gebruik, omgang met, reiniging en ontsmetting. Gelieve grondig te lezen voor ingebruikname van het product.

! BELANGRIJK Geeft een gevaarlijke situatie aan die kan leiden tot schade indien ze niet wordt vermeden.

PRODUCTBESCHRIJVING

Repose®ultracore® is een immersieve, statische, hybride polyurethaan schuimmatras ontwikkeld om tegemoet te komen aan de vereisten van de thuiszorg en de acute gezondheidszorg. Repose ultracore combineert verschillende elementen die, wanneer ze worden samen gebracht, aan gezondheidsmedewerkers en patiënten een uitzonderlijk niveau van comfort en drukverdeling bieden. In de kern van de matras bevindt zich de Repose ultracore binnenmatras, een systeem met meer dan 18 jaar klinische evidentie als bewijs van zijn gebruiksvriendelijkheid en degelijkheid.

Repose ultracore bestaat uit de volgende elementen:

- **Repose ultracore** – een U-vormige basis van hoog kwalitatief, polyurethaanschuim met geïntegreerde zijkanten en uitsnijdingen in het ligvlak.
- **Repose ultracore binnenmatras** – een reactieve éénkamerluchtmatras van thermoplastisch polyurethaan, doorlaatbaar voor waterdamp en rekbaar in meerdere richtingen.
- **Repose ultracore hoes** – een in meerdere richtingen rekbaar en waterdampdoorlaatbare hoes met ritssluiting aan 3 zijden, met een afdekflap over de ritssluiting en gelaste naden ter voorkoming van insijpeling van vloeistoffen.

GEBRUIKSINDICATIES

De Repose ultracore matras werd ontwikkeld voor de preventie en behandeling van decubitus, steeds in het kader van een decubituspreventieprogramma en moet worden gebruikt in combinatie met een bedframe met aangepaste afmetingen.

De Repose ultracore matras werd ontwikkeld om te kunnen worden gereinigd en hergebruikt.



VOORZORGEN:


Bij het gebruik van Repose ultracore matras moet het volgende in acht worden genomen:

- Mag niet worden gebruikt op een dubbel bed matrasframe
- Niet voor personen zwaarder dan 222 kg
- Niet voor personen met onstabiele fracturen ter hoogte van de wervelkolom
- Vermijd direct contact met hitte en scherpe voorwerpen
- Houd huisdieren weg van de matras
- Niet voor personen met een lichaamsvorm die niet volledig ondersteund kan worden

PRODUCTLABEL



65° C gedurende 10
minuten of 73° C
gedurende 3 minuten

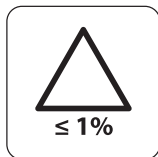

Bleekmiddel
toegestaan



Maximaal gewicht van
de gebruiker




Niet in prikken of
snijden




Latexvrij




Niet in de nabijheid van
een vlam houden

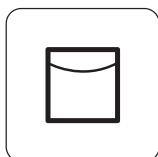

Lijndrogen

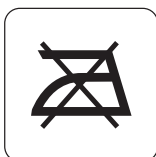

Niet strijken

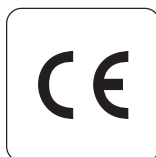

CE conform




Verwijzing naar de
gebruikershandleiding

GEbruIKSINSTRUCTIES

! BELANGRIJK Om de opslag en het omgaan met de matras te vergemakkelijken, wordt deze ultracore matras compact opgerold aangeleverd.

De matras moet worden ontrollt binnen 21 dagen na ontvangst. Na het ontrollen van de matras, open de matrashoes en plaats de opblaasbare Repose ultracore binnenmatras in het schuimkader, met de lichte zijde naar boven gekeerd.

- Breng het navelstrengventiel door de opening in het kader aan één van beide smalle zijden
- Oriënteer de hoos naargelang de plaatsing van het navelstrengventiel

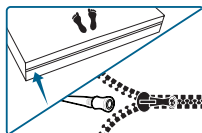

Open de ritsluiting om toegang te
hebben tot het navelstrengventiel

OPSLAG EN BIJHORENDE ZORG

De matras moet worden opgeslagen in een beveiligde omgeving, buiten het bereik van onbevoegden.

- Bewaar nooit andere producten boven op de ultracore
- Bewaar ultracore steeds in een vlakke horizontale positie
- Leg nooit rechtstreeks op de vloer
- Plaats een beschermende laag over ultracore tijdens de opslag
- Bewaar matrassen nooit vlak bij radiatoren of andere hittebronnen
- Hanteer ultracore steeds met minimum 2 personen, niet slepen!
- Plaats geen zware voorwerpen op de matras wanneer deze niet in gebruik is
- Laat nooit scherpe voorwerpen de coating doorboren
- Inspecteer regelmatig de binnen- en de buitenzijde van de matras
- Bewaar nooit in vochtige omstandigheden

! BELANGRIJK Verwijder voorzichtig de verpakking opdat de hoes van de matras niet wordt beschadigd.

Repose ultracore kan reeds worden gebruikt één uur na het ontrollen van de matras. Het is echter mogelijk dat het meer tijd in beslag neemt vooraleer de matras zijn oorspronkelijke vorm terug heeft aangenomen.

! BELANGRIJK Verzeker u ervan dat, na het uitrollen van de matras en voor ingebruikname, de naden van de hoes mooi aansluiten op de hoeken van de schuimmatras en de ritssluiting dicht is. Tijdens het transport kunnen de naden licht verschuiven maar deze kunnen makkelijk terug in lijn worden gebracht met het matrasschuim.

Enkele plooien kunnen nog enige tijd in de hoes zichtbaar blijven na het ontrollen van de matras, dit is een normaal gevolg van het oprollen van de matras.

! BELANGRIJK Het is aanbevolen de matras te heffen/dragen met 2 personen. Matrassen kunnen beschadigd worden wanneer ze niet op de juiste manier worden opgeslagen.


De Repose ultracore matras werd ontwikkeld voor gebruik op harde, rastervormige, geprofileerde of vlakke bedbodems, voor patiënten met een hoog risico op decubitus, met een maximum gewicht van 222 kg.

Verzeker er u van dat het oppervlak van het bedframe vrij is van alle vreemde voorwerpen om beschadiging van de hoes te voorkomen.

De hoes van ultracore is afneembaar voor reiniging. Zie hoofdstuk "Reiging, ontsmetting en nazorg".

Het label op de matras bevat een uniek nummer, dat moet worden gebruikt wanneer beroep wordt gedaan op de garantie. Verwijder NOOIT dit label (zie ook het hoofdstuk " Garantie").


PLAATSING VAN HET NAVELSTRENGVENTIEL VAN DE REPOSE ULTRACORE BINNENMATRAS

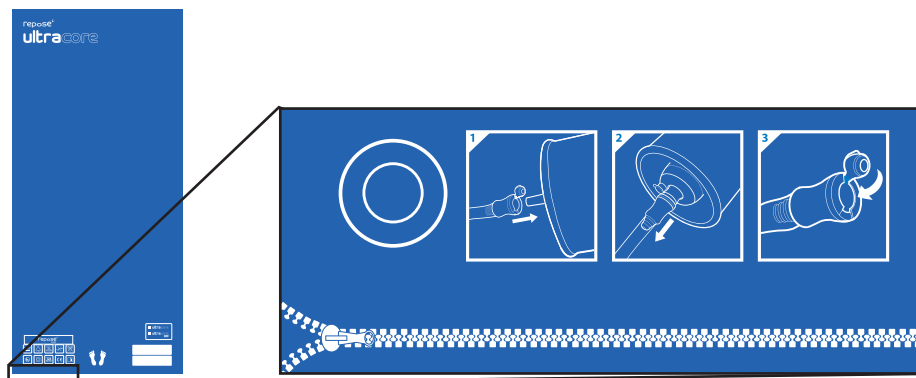



Het navelstrengventiel van de Repose ultracore binnenmatras bevindt zich binnen in de hoes, aan de linkerkant van het voeteneinde, wanneer men aan het voeteneinde staat en naar het bed kijkt.

Via het navelstrengventiel wordt de Repose ultracore binnenmatras opgeblazen en gecontroleerd op de juiste interne druk.


GEBRUIKSAANWIJZING

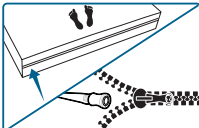
- 1 

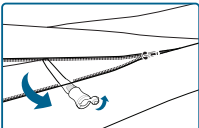
Open de ritssluiting om toegang te hebben tot het navelstrengventiel
- 2 

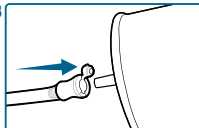Open het ventielkapje op de ventielslang
- 3 

Steek het opzetstuk van de pomp in het ventiel
- 4 

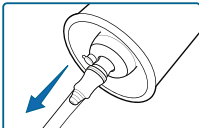Blaas de Repose Ultracore binnenmatras op tot er lucht hoorbaar ontsnapt uit het overdrukventiel in de pomp en dit overdrukventiel zich sluit met een hoorbare klik
- 5 

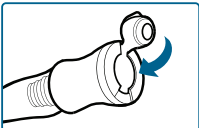Verwijder de pomp van het navelstrengventiel
- 6 

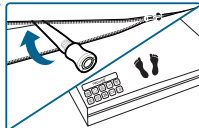Plaats het ventielkapje terug op het navelstrengventiel
- 7 

Plaats het navelstrengventiel terug in de hoes en sluit de ritssluiting

OPGEPAST: controleer dagelijks de druk van de Repose ultracore binnenmatras. Bij twijfel, herhaal de opblaas instructies zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing.

REINIGING/ONTSMETTING EN NAZORG – REPOSE ULTRACORE HOES

LICHTE BEVUILING

! BELANGRIJK Bij afwezigheid van zware besmetting of ongewoon risico, volstaat het verwijderen van bevuilding met warm water en een detergent. Indien vereist kan de hoes worden afgeveegd met een 0,1% hypochlorietoplossing (1000 ppm). Verzeker u ervan de hoes vervolgens ook af te vegen met een niet schurende doek met zuiver water en de hoes zeer goed te drogen. Zorg voor voldoende ventilatie.

ZWARE BEVUILING

! BELANGRIJK Bij zware besmetting moet de hoes eerst worden gereinigd met water en een detergent en vervolgens worden ontsmet met een 0,1% hypochlorietoplossing. Verzeker u ervan de hoes vervolgens ook af te vegen met een niet schurende doek met zuiver water en de hoes zeer goed te drogen. Zorg voor voldoende ventilatie.

! BELANGRIJK Indien nodig kan een 1% hypochlorietoplossing (10.000ppm) en koud water worden gebruikt gedurende niet meer dan 2 minuten.

! BELANGRIJK Machinewasinstructies op de hoes

De hoes kan worden ontsmet door deze te wassen op 65°C gedurende 10 minuten of op 73°C gedurende 3 minuten. **BHTA richtlijnen aangaande omgang met, reiniging en inspectie van een matras voor de gezondheidszorg (January 2012 - HHTA HM 0112)**

DROGEN

! BELANGRIJK Om krimpen te voorkomen mag alleen lijndrogen in een zuivere binnenomgeving. Hoezen moeten volledig droog zijn voordat ze terug rond de matras worden geplaatst.

! BELANGRIJK Niet droogpersen, niet strijken

INSPECTIE

WAARSCHUWING:

Inspecteer regelmatig de binnen- en buitenzijde van de hoes en de ritssluiting op schade. Indien de hoes gevlekt is, bevuild of gescheurd moeten het schuim en de Repose Ultracore binnenmatras worden geïnspecteerd. Beschadigde/bevuilde hoezen en matrassen moeten worden gerapporteerd aan de dienst/departementsverantwoordelijke. Indien de binnenkant van de matras vochtig of erg bevuild is, moet de matras uit dienst genomen worden.

REINIGING/ONTSMETTING EN NAZORG – REPOSE ULTRACORE BINNENMATRAS

- De Repose ultracore binnenmatras kan worden gereinigd met water en detergent en kan worden ontsmet overeenkomstig de voorschriften van **BHTA richtlijnen aangaande omgang met, reiniging en inspectie van een matras voor de gezondheidszorg (January 2012 - HHTA HM 0112)**
- Ontsmettingsmiddelen op basis van alcohol en phenol mogen niet worden gebruikt
- Laat drogen voor hergebruik of opslag

! BELANGRIJK Draag wegwerphandschoenen en schort. Draag oog- en gezichtsbescherming bij gevaar op spatten. Handen moeten worden gewassen na het verwijderen van de handschoenen. De Repose Ultracore binnenmatras moet droog zijn vooraleer deze terug in de hoes te plaatsen.

CONTROLE/AUDIT

! BELANGRIJK Het is aangeraden om de 6 maanden of jaarlijks een controle te doen van alle matrassen op een afdeling/departement.

In een thuissituatie dient een controle te gebeuren tussen elke patiënt.

HERGEBRUIK

! BELANGRIJK Een reinigingsrapport moet worden bijgehouden. Het product is geschikt voor hergebruik. Voor hergebruik, reinig het product grondig, zie ook het hoofdstuk "Reiniging/ontsmetting en nazorg"

VERWIJDEREN

! BELANGRIJK Het verwijderen en recyclen van een gebruikt product en de verpakking moet gebeuren in overeenstemming met de specifieke wetgeving in elk land.

CARDIOPULMONALE RESUSCITATIE (CPR)

Hartmassage moet worden uitgevoerd op een hard oppervlak om een correcte en voldoende diepe compressie te bekomen. Wanneer de patiënt dit nodig heeft mag het in geen geval worden uitgesteld. Gebruik indien mogelijk een ondersteekbord of verplaats de patiënt naar een hard oppervlak.

BRANDTESTEN

Het schuim voldoet aan de vereisten van Furniture & Furnishing (Fire) (Safety) Regulations 1988

1. Repose Ultracore matras (UK specificatie) voldoet aan de vereisten van BS 7177: 2008 voor middelgrote gevaren
2. Repose Ultracore matras (Europese specificatie) voldoet aan de vereisten van BS EN 597-1: 1995 / BS EN 597-2: 1995

GARANTIE

De garantie op de Repose Ultracore matras is geldig vanaf het moment van verzending. Indien een defect of fout wordt vastgesteld, neem onmiddellijk contact op met Repose klantendienst op Tel: 0044 (0) 01495235800 / e-mail: info@reposedirect.com. Frontier Medical Group neemt geen verantwoordelijkheid voor schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of door het niet naleven van de instructies in de gebruikershandleiding. Tijdens de garantieperiode wordt elk product onderhevig aan productie- of materiaalfouten vervangen. De garantie vervalt bij elke niet toegestane verandering aangebracht aan het product.

Zowel de garantie als de brandveiligheidcertificering vervalt wanneer niet-Repose onderdelen worden gebruikt bij een Repose ultracore product.

GARANTIE – SCHUIM EN HOES

- 5 jaar garantie vanaf datum van verzending op productiefouten
 - Normale slijtage wordt niet door de garantie gedekt
 - Elke garantie maakt deel uit van de verkoopsvoorwaarden
 - Elke aanspraak op de garantie moet worden gestaafd met het productnummer, geprint op het productlabel
-

GARANTIE – REPOSE ULTRACORE BINNENMATRAS

- 3 jaar garantie vanaf datum van verzending op productiefouten
- Normale slijtage wordt niet door de garantie gedekt
- Elke garantie maakt deel uit van de verkoopsvoorwaarden
- Elke aanspraak op de garantie moet worden gestaafd met het productnummer, geprint op het productlabel



Frontier Therapeutics Limited
Innova One, Tredegar Business Park,
Tredegar, Blaenau Gwent,
NP22 3EL, UK

Tel: +44 (0) 330 460 6030
Email: info@frontier-group.co.uk

www.frontier-group.co.uk



Frontier Medical Germany GmbH
Geschäftsstelle Deutschland,
Nußbaumallee 27 A, 14050 Berlin,
Deutschland

Tel: +49 (0) 303 702 6500
Email: info@frontier-group.co.uk

www.frontier-medical-germany.de

Frontier Therapeutics Inc.
505 Ellicott St, Suite A5, Buffalo,
NY 14203, USA

Tel: +1 800 303 9544
Email: contactus@frontier-therapeutics.com

www.frontier-therapeutics.com



Repose is covered by UK patent no. 2328152
Ultracore is a registered trade mark of Frontier Therapeutics Limited.
© Copyright Frontier Therapeutics Limited, 2022.
All rights reserved. GP0052_B93_10